



Create Well Life

CERAGEM

| Charcoal



Vuelve más inteligente-

CERAGEM MASTER

Cuidado de nuestra columna vertebral y abdomen con varios modos e intensidades!
Ahora, cuida de tu cuerpo y mente conjuntamente!

V4



■ Avances de V4 – 10 avances

1. Diseño de alta calidad – Piel de alta gama(Piel de saffiano) y acabados satisficados.
2. Programas variadas (15 programas)
3. Intensidades más detalladas (9 niveles)
4. Uso de ceratonics
5. Proyector abdominal con calor y vibración.
6. Programa personalizado Modo Master (Modo busca vertebra – función gps)
7. Altavoces Bluetooths (Vinculable con el movil)
8. Guía de voz
9. 2 Proyectores exteriores.
10. Nuevo control remoto.




■ V4 – Diseño de alta calidad (Piel de saffiano)

| Charcoal



| Charcoal

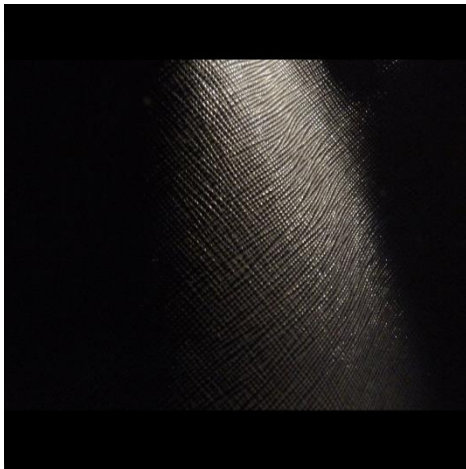

| Charcoal





■ Modos V4 – Modo intensivo

- Tiempo de la sesión : 90min.
- Patrón de movimiento: Masaje total +Masaje parcial +Masaje intensivo(En caso de presionar el boton arriba o abajo)

* Masaje parcial : Con un movimiento regular Mueve 75mm para masajear una zona de 150mm(경추부/미추부 예외)

Escaneo → Masaje total(1.5veces → Sacro → Cervicales → Sacro → Cervicales (Termina en las cervicales)

* Masaje intensivo : Si pulsa el botón arriba o abajo maseajea arriba y abajo 75mm cada lado (Total 150mm)

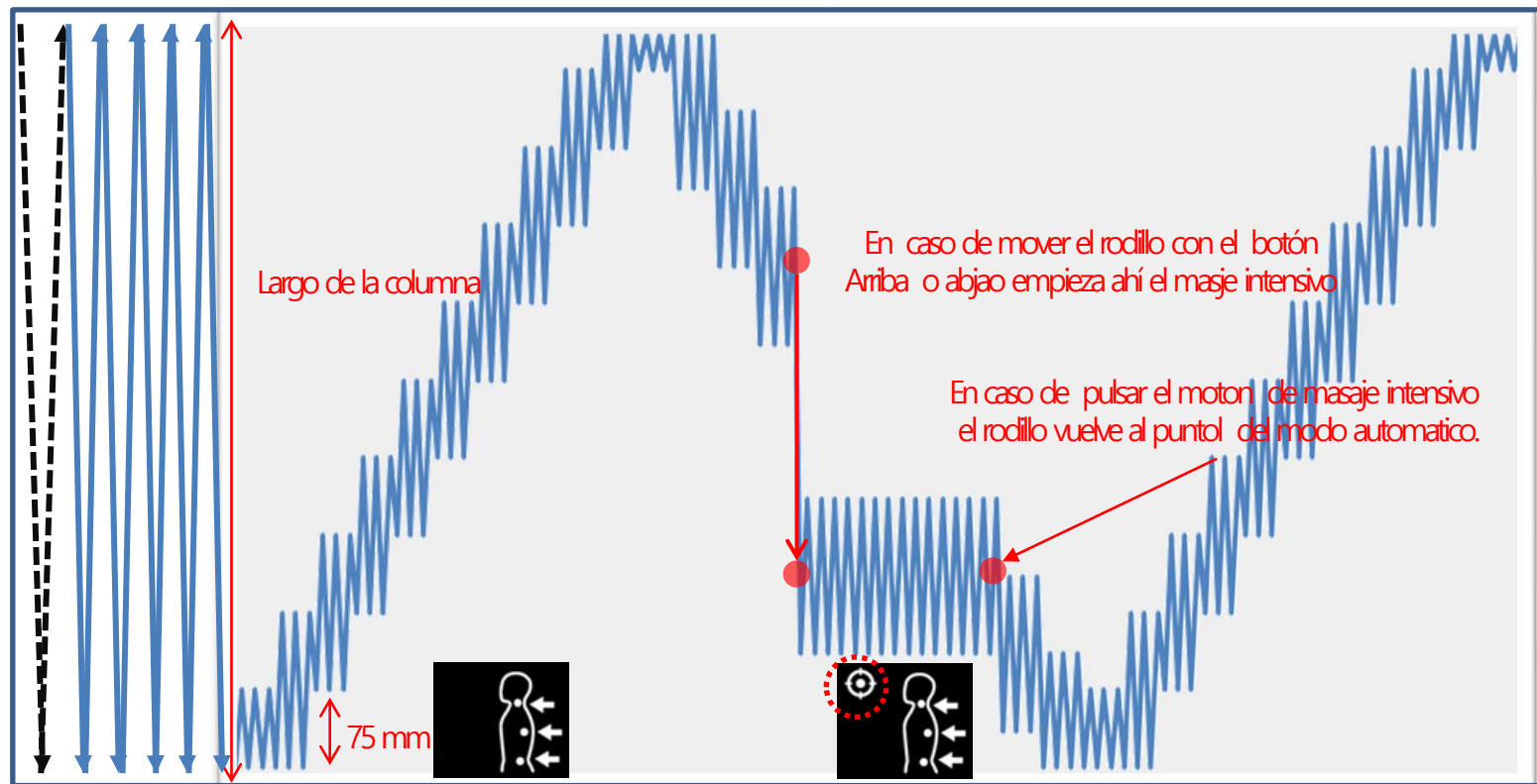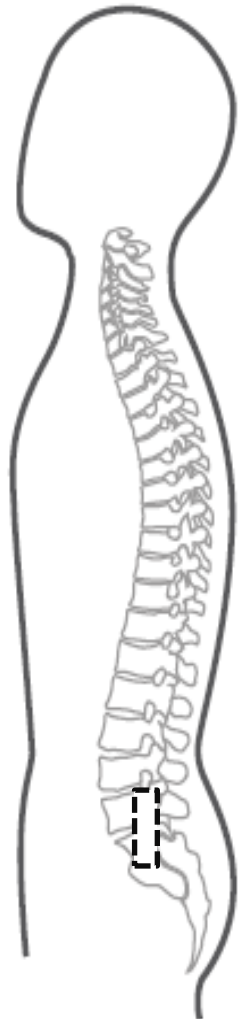

En caso de mover el rodillo con el botón Arriba o abajo empieza ahí el masje intensivo

En caso de pulsar el boton de masaje intensivo el rodillo vuelve al puntol del modo automatico.

Escaneo

Masaje total

Masaje parcial

Masaje intensivo


Masaje parcial

Manual / Semiauto – Modo Master (Función GPS)

- * **Modo Master** : Localizar el rodillo interno a la vèrtebra deseada para trabajar la zona concreta.
- Tiempo de funcionamiento : 1hora(A partir del momento de presionar lel último boton)
- Características del movimiento : Hace el mismo movimiento que el manual o semiautomático, pero localizado en el número de vèrtebra deseada.


Modo normal

El usuario mueve el rodillo interno a la zona desada a través de las sensaciones para usar el modo manual o semiautomático.

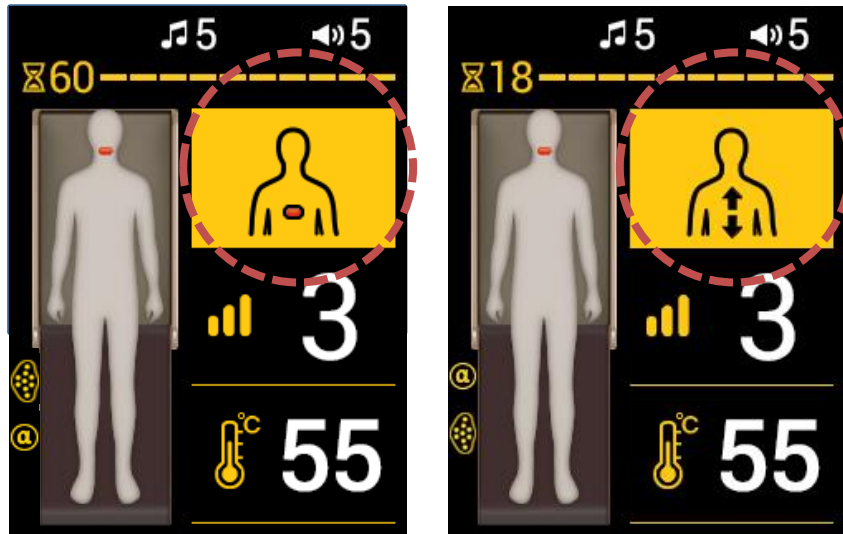

Modo Master (Función GPS)


Después de escaear la columna vertebral lleva el rodillo de forma automática a la vèrtebra deseada.

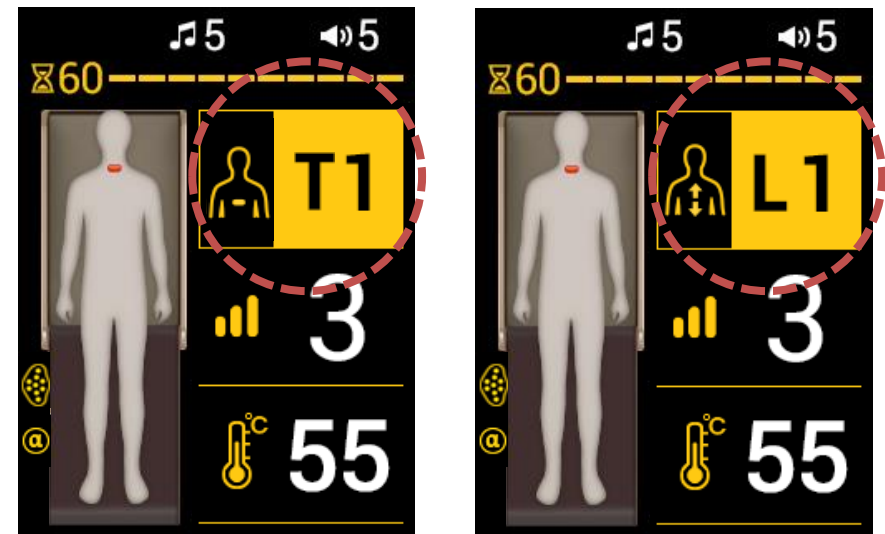

1. Seleccionar modo manual o semeautomático con el control remoto.
2. Mover el rodillo a la zona de la columna vertebral.
3. Empieza el masaje deseada.

1. Pulcar el boton manual o semiautomático una vez más.
(Cambia la pantalla de manual o semiautomático convencional. (Aparece la vèrtebra y su número)
2. **Seleccionar el número de la vèrtebra deseada.**
3. **El rodillo escanea la columna y se sitúa automáticamente en la vèrtebra**

Master V4 마스터 모드

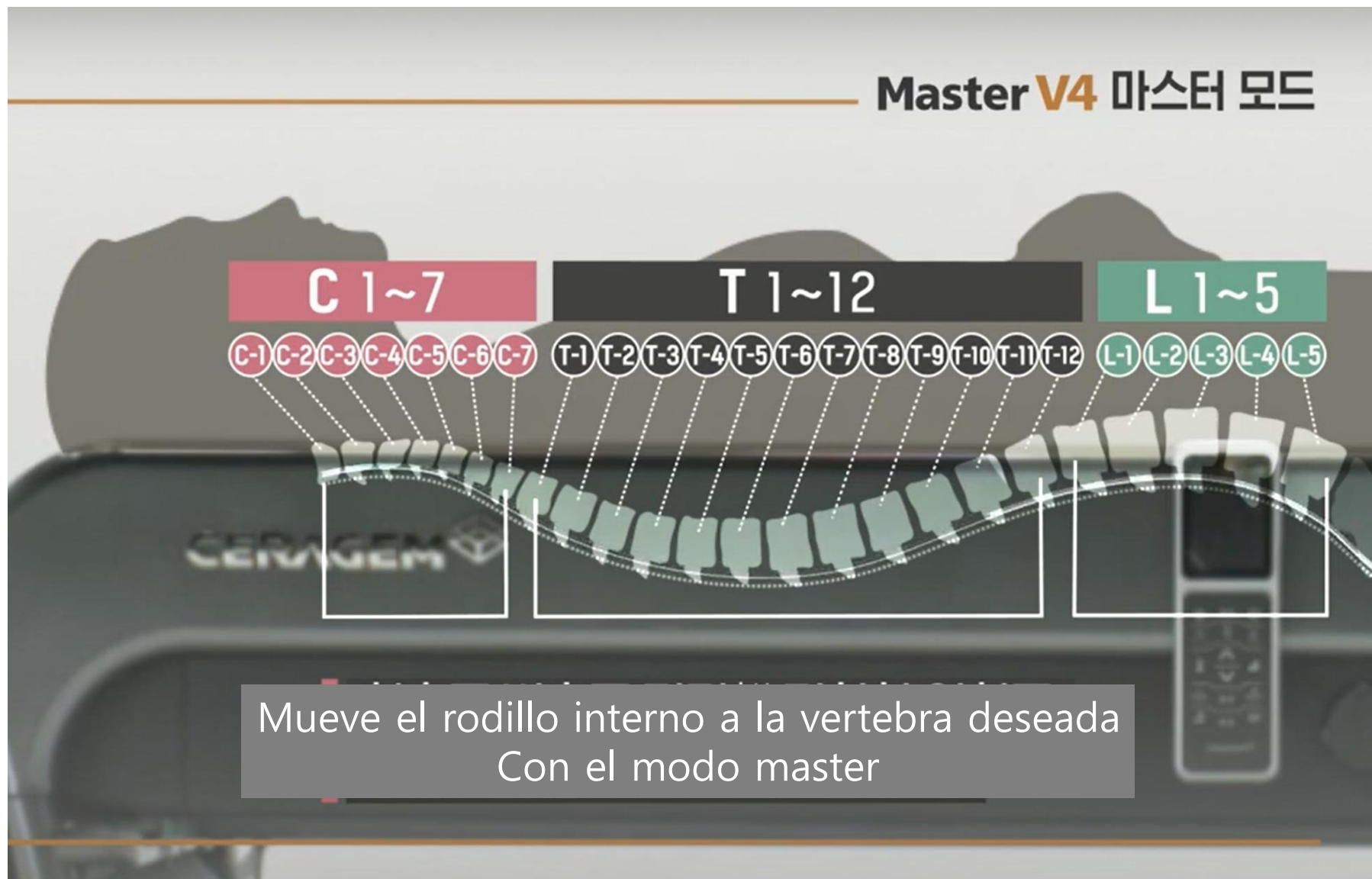

Mueve el rodillo interno a la vertebra deseada
Con el modo master

■ Fragmentacion de la intensidad(6Niveles → 9Niveles)

Fragmenta las intensidades para mejor adaptacion de los nuevos usuarios





- Nivel 1 : Nivel de escaneo, mas suave que la intensidad 1 anterior.
- Nivel 2~6 : Los niveles 1~3 anterior los fragmenta en 5 niveles para mejor adaptacion de los nuevos
- Nivel 7~9 : Los niveles 4~6 anteriores se mantiene para los que prefieren intensidades altas.



■ V4 Uso de ceratonic – Proyector interno



○ Proyector interno

- Mejora la conductividad de calor infrarrojo, beneficios de ceratonic
- Tiempo en alcanzar los 65°C : 25min. ► 17min.

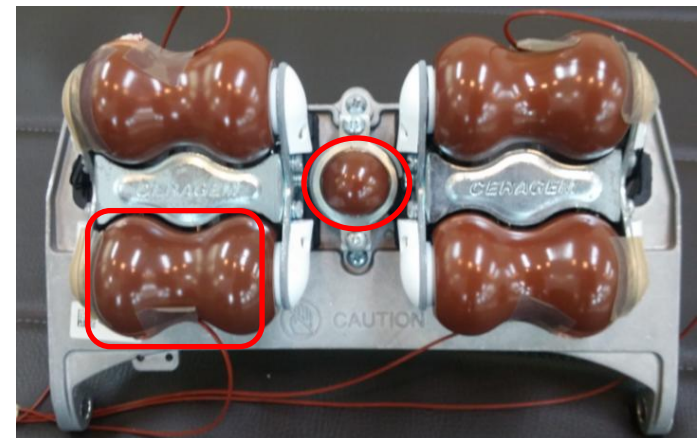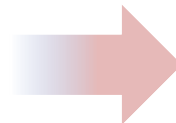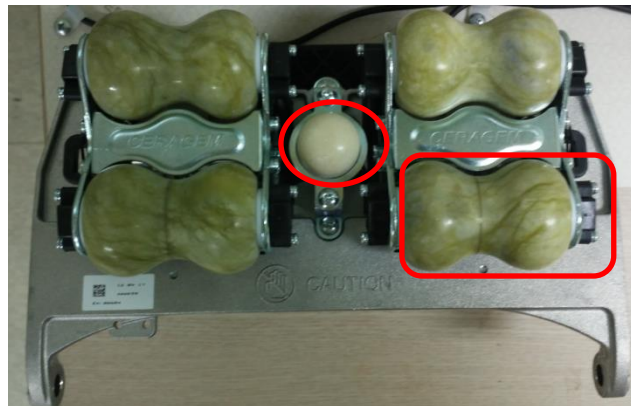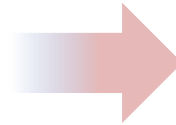

○ Projectores exteriores (3esferas / 9esferas)

- Mejora la conductividad de calor infrarrojo, beneficios de ceratonic.

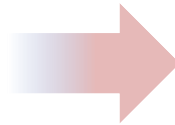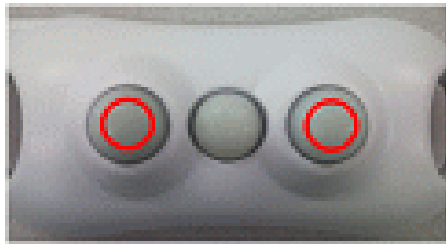




Modos de masajes (3)

- 모드 1 : Modo para circulacion(Usa en el centro)
- 모드 2 : Modo vibracion suave
- 모드 3 : Modo de vibracion dinamica

Intensidades de masaje (2)

Tiempo de masaje: 18min.

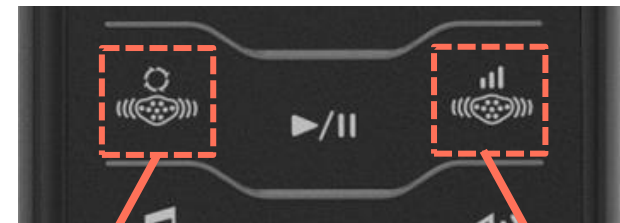

Selección de Modos de
masaje

Selección de intensidad
de masaje

Se puede vincular con el movil para poder variar la experiencia.


■ Proporcionas diferentes temas de sonidos

1) Puede seleccionar el tipo de sonido que el usuario desee

- Puede escuchar la musica que tiene el usuario
- Reproduce Youtube, spotify etc
- No hace falta bajar la música a la tarjeta para escuchar.
- **Ceragem sound viene incorporado en la tarjeta micro sd interna.**




Los usuarios usan el producto mas comodamente gracias a la guia de voz

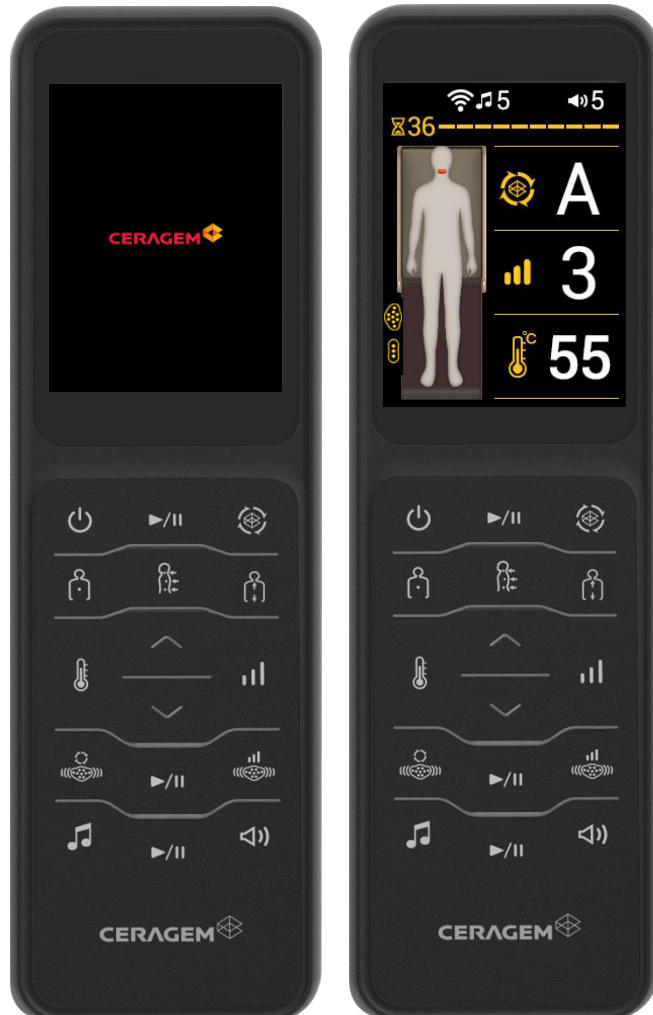

- * Hola, costumbre que mejora su salud día a día.Ceragem
- * El rodillo se moverá a la zona cervical.
- * Se está realizando el escaneo para un correcto tratamiento.
- * Posiciónese correctamente.
- * El escaneo está completado.
- * Comienza el programa seleccionado.
- * Moda A / Modo intensivo / modo 6
- * Se ha completado el masaje. Su compañero de la salud.
Ceragem

■ V4 – Multi conector

Añade un puerto USB y 2 conectores para proyectores exteriores

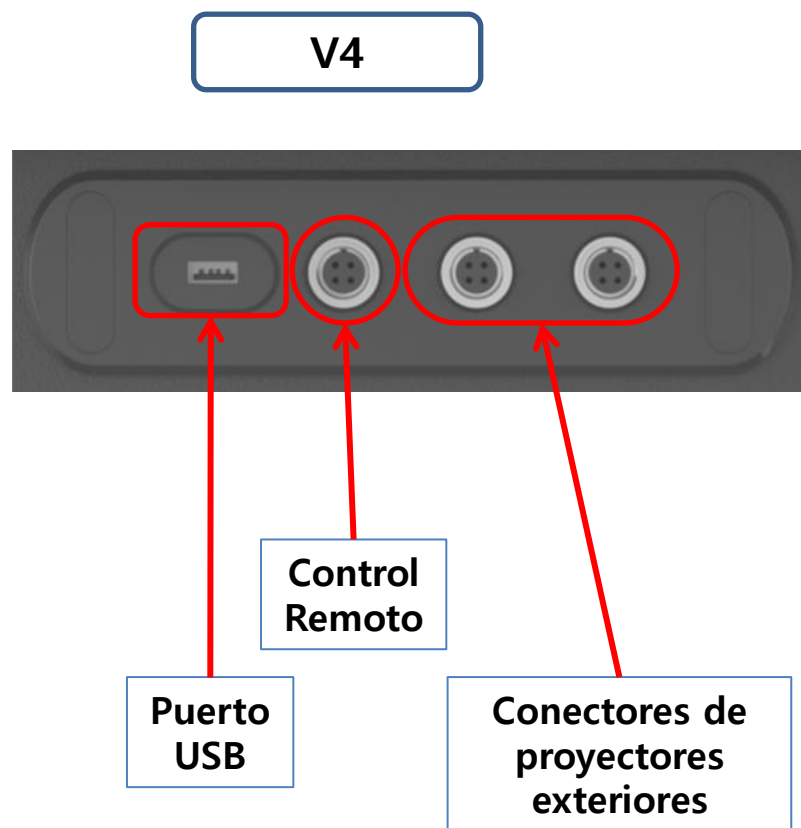

◆ V4 Diseño

| Charcoal

Saffiano, Piel no animal



◆ V4 Diseño

| Charcoal



◆ V4 Diseño

| Charcoal



◆ V4 Diseño – Mando

■ Mando




◆ V4 Diseño - Proyectores

■ Proyectores exteriores



◆ V4 Diseño –



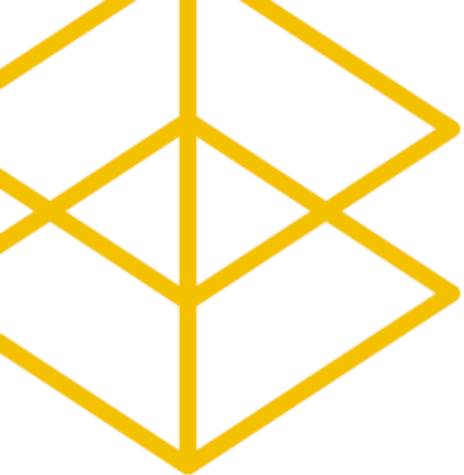

Create Well Life

CERAGEM